



HDR+UCL

(橈骨遠位端ロックングプレート)

(尺骨遠位端ロックングプレート)

HAI Distal Radius and Ulna Locking Plate System



HDR 桡骨遠位端ロックングプレート

〔適応例〕 桡骨遠位端骨折(掌側固定用)


HDR桡骨遠位端ロックングプレートは、遠位部固定に中空ロックングピン/スクリューを採用したことにより、X線透視画像でのガイドピン刺入位置評価が容易となり、桡骨遠位関節面軟骨下骨直下での強固なSubchondral Supportの実現を図ります。

CFRP製ターゲティングガイドシステムにより、方形回内筋を温存したMIS手術やCondylar Stabilizing法が容易に行え、多種多様な骨折型に対する手術手技の選択の幅を広げ、手術時間の短縮を図ります。

ナロー(遠位3穴)

ブロード(遠位4穴)

プレート遠位縁のロープロファイル化により、屈筋腱損傷を防止します。

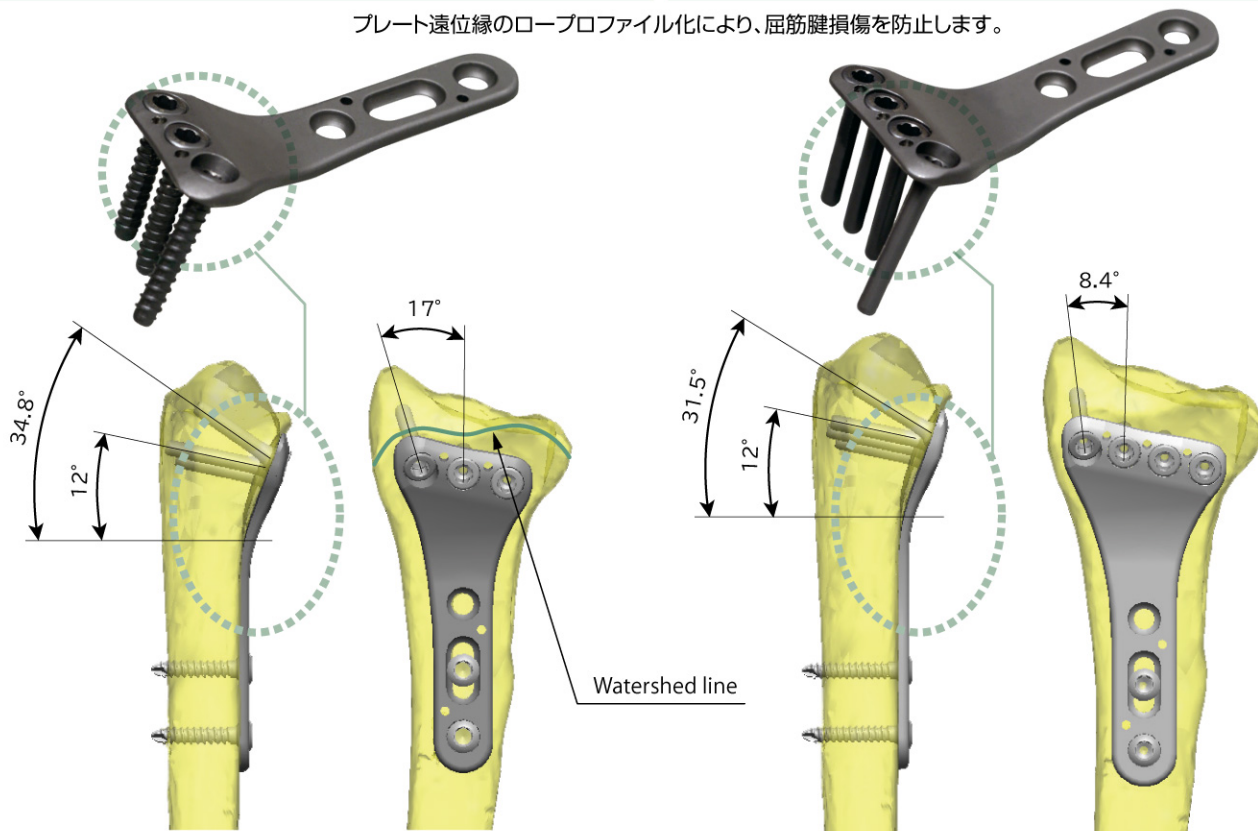


UCL 尺骨遠位端コンディラープレート



〔適応例〕 尺骨遠位端骨折

UCL尺骨遠位端コンディラープレートは、尺骨遠位関節面軟骨下骨直下にフックを挿入し、尺骨茎状突起部をバットレスで支え、バットレス部より2.7ロックングスクリューをクロスして挿入(クロスロックングシステム)することにより、骨脆弱な尺骨頭への角度安定性の向上を図ります。



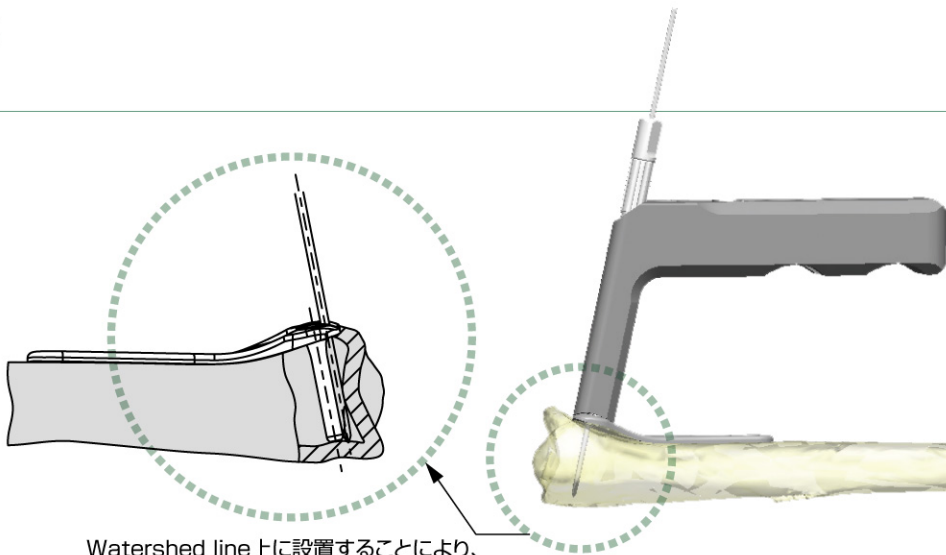


Watershed line上に設置することにより、
関節面軟骨下骨直下で
Subchondral supportされます。

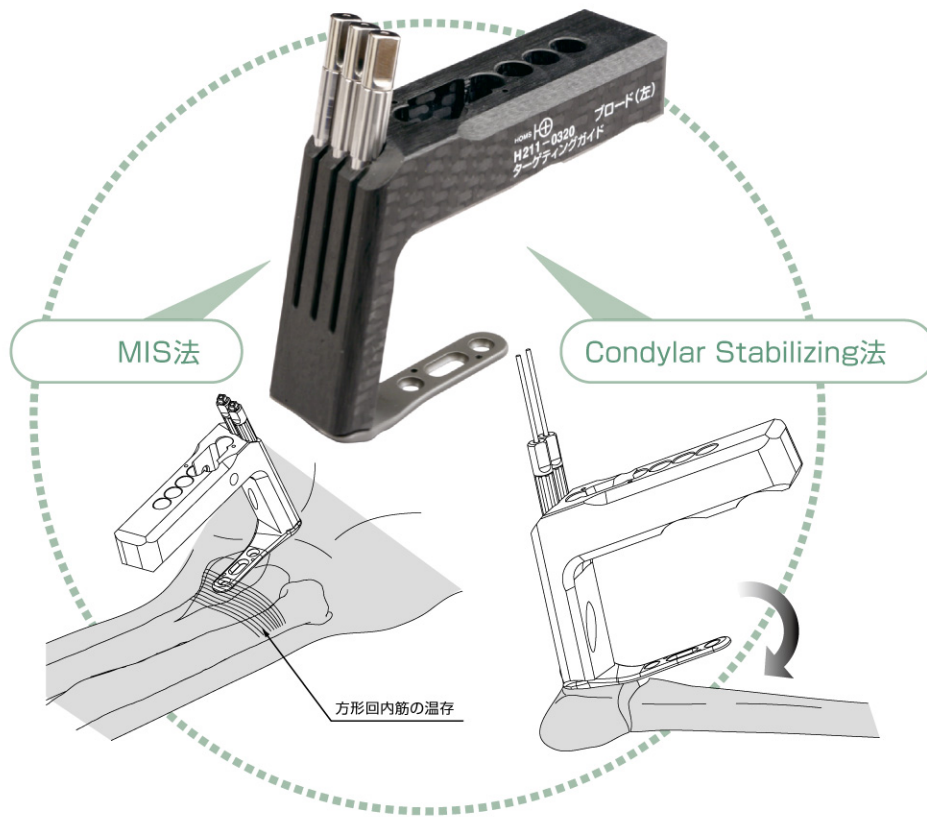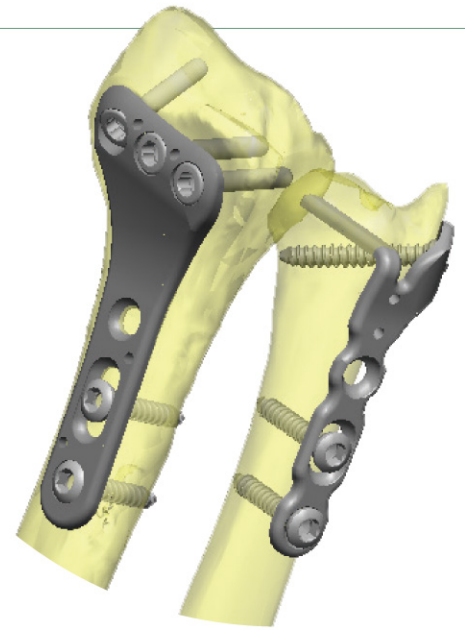

MIS法

Condylar Stabilizing法


方形回内筋の温存

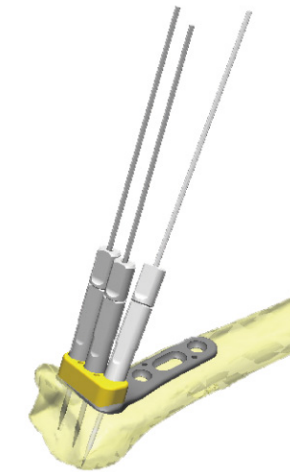

従来法でも容易な手技を実現

Cross Locking System

クロスロッキングシステムにより関節面軟骨下骨を強固にサポートします。

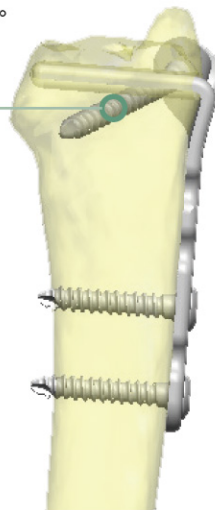

橈骨遠位端ロッキングプレート 左

遠位部幅 21mm 遠位部厚さ 2.5mm
骨幹部幅 9mm 骨幹部厚さ 1.6mm



カタログNo.	遠位部穴数	骨幹部穴数	全長(mm)	JANコード
H508-0303L	ナロー 3穴	3穴	51.0	4580118203402
H508-0304L		4穴	58.7	4580118203419
H508-0306L		6穴	74.2	4580118203433

橈骨遠位端ロッキングプレート 右

遠位部幅 21mm 遠位部厚さ 2.5mm
骨幹部幅 9mm 骨幹部厚さ 1.6mm



カタログNo.	遠位部穴数	骨幹部穴数	全長(mm)	JANコード
H509-0303R	ナロー 3穴	3穴	51.0	4580118203488
H509-0304R		4穴	58.7	4580118203495
H509-0306R		6穴	74.2	4580118203518

橈骨遠位端ロッキングプレート 左

遠位部幅 25mm 遠位部厚さ 2.5mm
骨幹部幅 10mm 骨幹部厚さ 1.6mm



カタログNo.	遠位部穴数	骨幹部穴数	全長(mm)	JANコード
H508-0403L	ブロード 4穴	3穴	56.4	4580118203440
H508-0404L		4穴	64.2	4580118203457
H508-0406L		6穴	79.7	4580118203471

橈骨遠位端ロッキングプレート 右

遠位部幅 25mm 遠位部厚さ 2.5mm
骨幹部幅 10mm 骨幹部厚さ 1.6mm



カタログNo.	遠位部穴数	骨幹部穴数	全長(mm)	JANコード
H509-0403R	ブロード 4穴	3穴	56.4	4580118203525
H509-0404R		4穴	64.2	4580118203532
H509-0406R		6穴	79.7	4580118203556

3.0ロッキングキャニュレйтеッドキャンセラスクリュー

スクリューピッチ 1.2mm
六角サイズ 花形2.5mm



カタログNo.	全長(mm)	スレッド径	ヘッド径	JANコード
H230-0014	14	φ3.0	φ5.0	4580118203587
H230-0016	16			4580118203594
H230-0018	18			4580118203600
H230-0020	20			4580118203617
H230-0022	22			4580118203624
H230-0024	24			4580118203631
H230-0026	26			4580118203648
H230-0028	28			4580118203655

2.5ロッキングキャニュレйтеッドピン

六角サイズ 花形2.5mm



カタログNo.	全長(mm)	ピン径	ヘッド径	JANコード
H225-0014	14	φ2.5	φ5.0	4580118203693
H225-0016	16			4580118203709
H225-0018	18			4580118203716
H225-0020	20			4580118203723
H225-0022	22			4580118203730
H225-0024	24			4580118203747
H225-0026	26			4580118203754
H225-0028	28			4580118203761

販売名: HAIラディアスプレートシステム
医療機器承認番号: 21800BZZ10052000

尺骨遠位端コンディラープレート 左

厚さ 1.6mm
フック幅 3.0mm



カタログNo.	骨幹部穴数	フック長	オプション	JANコード
H514-0312L	3穴	12mm		4580118207271
H514-0314L		14mm		4580118207288
H514-0316L		16mm		4580118204010
H514-0318L		18mm	※	4580118204027
H514-0512L	5穴	12mm		4580118207431
H514-0514L		14mm		4580118207448
H514-0516L		16mm		4580118204072
H514-0518L		18mm	※	4580118204089

尺骨遠位端コンディラープレート 右

厚さ 1.6mm
フック幅 3.0mm



カタログNo.	骨幹部穴数	フック長	オプション	JANコード
H515-0312R	3穴	12mm		4580118207516
H515-0314R		14mm		4580118207523
H515-0316R		16mm		4580118204102
H515-0318R		18mm	※	4580118204119
H515-0512R	5穴	12mm		4580118207677
H515-0514R		14mm		4580118207684
H515-0516R		16mm		4580118204164
H515-0518R		18mm	※	4580118204171

販売名: HAIプレートシステム
医療機器承認番号: 21800BZZ10129000

2.7ロッキングスクリュー (S)

スクリューピッチ 1.0mm
ヘクスローブNo.8



カタログNo.	全長(mm)	スレッド径	ヘッド径	JANコード
H327-2014	14	φ2.7	φ4.0	4580118207110
H327-2016	16			4580118207127
H327-2018	18			4580118207134
H327-2020	20			4580118207141

販売名: HAIラディアスプレートシステム
医療機器承認番号: 21800BZZ10052000

2.7コーティカルスクリュー

スクリューピッチ 1.0mm
ヘクスローブNo.10



カタログNo.	全長(mm)	スレッド径	ヘッド径	JANコード
H327-0010	10	φ2.7	φ5.0	4562116349054
H327-0012	12			4562116349061
H327-0014	14			4562116349078
H327-0016	16			4562116349085
H327-0018	18			4562116349092
H327-0020	20			4562116349108

販売名: HAIコーティカルスクリュー
医療機器承認番号: 21800BZZ10080000

<インプラント>

医療機器分類	高度管理医療機器	滅菌済み 再使用禁止
成分	チタン合金Ti-6Al-4V	
使用上の注意	添付文書参照のこと	

<器械>

販売名	HAI橈骨遠位端ロッキングプレート用手術器械
医療機器届出番号	20B1X0006H00024
医療機器分類	一般医療機器
成分	ステンレス,PF,チタン合金,PEI,CFRP
使用上の注意	添付文書参照のこと

<器械>

販売名	HAI尺骨遠位端ロッキングプレート用手術器械
医療機器届出番号	20B1X0006H00025
医療機器分類	一般医療機器
成分	ステンレス,PF
使用上の注意	添付文書参照のこと

販売元



株式会社 ホムズ技研 営業部

東京支店	Tel: 03-5989-0090	Fax: 03-5989-0091
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006